


För kontinuerlig subkutan behandling med läkemedel:

Neria™ Soft och Neria™ Soft90

– delbara infusionsset med mjuk kanyl och integrerad hudvänlig häfta.

- Infusionsseten har dubbla väggar vilket förhindrar slangknickar.
- Luerkoppling som passar alla standardsprutor.
- Finns i vardera två nålstorlekar.
- 10 st/förpackning.

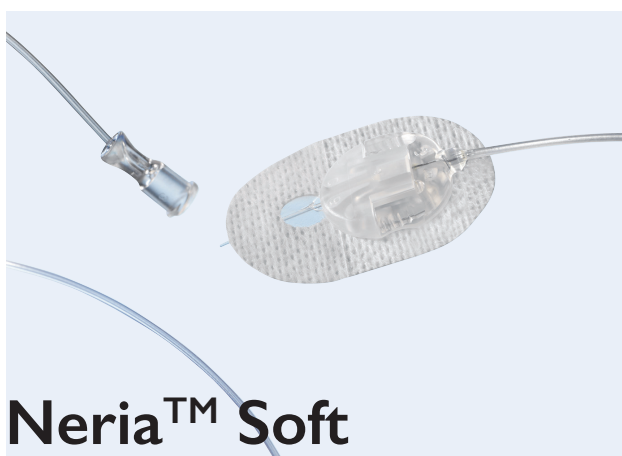

Neria™ Soft

45°, 27 G, mjuk kanyl

Neria™ Soft appliceras i 20–45° vinkel. Passar bra även för personer som har lite underhudsfett. Kan används vid palliativ vård för behandling av smärta samt subkutan rehydrering.¹

- Stabilitetstestad och godkänd för immunoglobuliner och morfin.^{2,3,4}
- 13 mm och 17 mm kanyl
- 30, 60, 80 och 110 cm slanglängd



Neria™ Soft90

90°, 27 G, mjuk kanyl (22–23 G)

Neria™ Soft90 appliceras rakt ner i 90° vinkel. Stickskydd. Kan används vid palliativ vård för behandling av smärta samt subkutan rehydrering.⁵

- Testad för morfin⁶
- 6 mm och 9 mm mjuk kanyl
- 30, 60 och 110 cm slanglängd

För Användarinstruktion – se nästa sida.

För beställning av Neria Soft och Neria Soft90, se beställningslista under Flik 2 i pärmen. Du kan också beställa en DIGITAL version av denna beställningslista på info@infucare.se Skriv "Önskar digitala beställningslistor för subkutan läkemedelsbehandling" i ärendemeningen så får du listor med vändande e-post för enklare hantering.


Önskas VARUPROV? Beställ på info@infucare.se

Referenser:


1. Gabriel, J. Subcutaneous infusion in palliative care: the neria™ soft infusion set. International Journal of Palliative Nursing 2012, vol 18, No 11. 2. Compatibility and stability testing of the catheter device Unomedical comfort with the immunoglobulin Subcuvia. IKFE Report. July 23, 2009. Data on file. Unomedical. 3. Transferability of biocompatibility test results from tests with Subcuvia to other corresponding drugs. IKFE No. 09016. April 16, 2009. Data on file. Unomedical. 4. Drug Compatibility Study of Three Infusion Devices with Morphine Sulfate, version 1.4, IKFE 10006, September 2, 2001. Data on file. Unomedical. 5. Gabriel, J. Subcutaneous infusion in palliative care: a focus on the neria™ soft90 infusion set. International Journal of Palliative Nursing 2014, Vol 20, No 9. 6. Statement, Drug Compatibility Test ID V60 – neria™ soft 90, Data on file. Unomedical.

Neria™ Soft90


Användarinstruktion

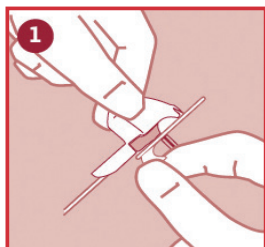


1 Dra försiktigt bort skyddspappret.

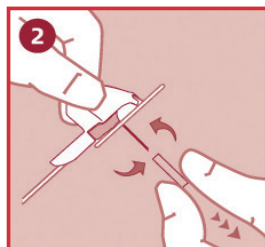


2 Vrid försiktigt och dra av nålskyddet.

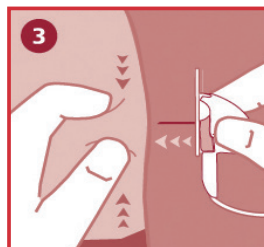


3 Nyp tag i huden med hjälp av tumme och pekfinger och tryck in Neria™ Soft 90 infusionsset med 90° vinkel (rakt in).

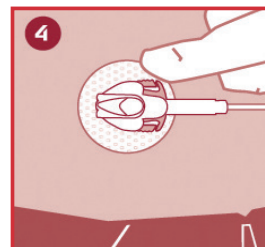


4 Tryck fast häftan mot huden.

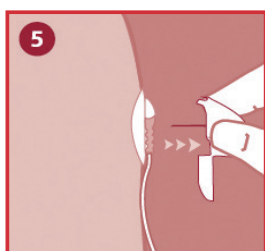

5 Avlägsna nålen genom att försiktigt dra införaren rakt ut.

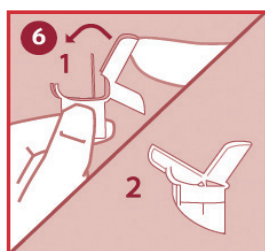

6 Säkra nålen genom att vika över införaren så att den täcker nålen.

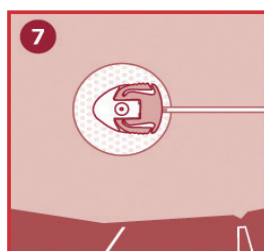

7 Kontrollera infusionssetet då och då så att det sitter som det ska.

neria™
SOFT 90
tubing

Läs alltid bipacksedeln som medföljer i förpackningen för utförlig användarinstruktion.