



Dexcom

G5™ mobile

Kontinuerlig glukosmätning direkt i mobilen!

3 nycklar krävs för behandlingsbeslut:

- **Glukosvärde**
- **Trendpil**
- **Trendkurva med de tre senaste prickarna**

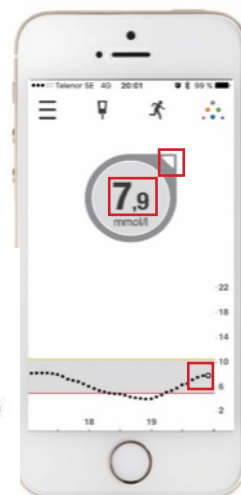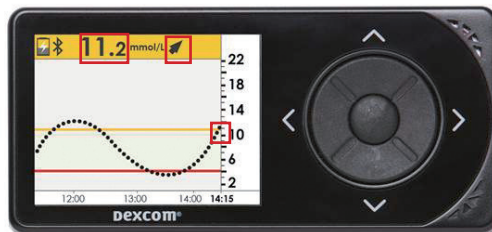

Korrekt kalibrering för bästa mätnoggrannhet

1. Kalibrera med fingerstick två gånger per dygn med max 12 timmars mellanrum.
2. Använd samma blodsockermätare hela perioden (gärna "silvermätare"*).
3. Kontrollera att stickorna förvarats rätt, inte gått ut i datum.
4. Handen ska vara ren och torr före fingerstick.
5. Lägg in kalibreringsvärdet inom fem minuter.
6. Kalibrera med fingerstick, använd inte alternativa stickställen såsom t.ex. underarmen.
7. Undvik kalibrering vid snabb förändring, det vill säga vid enkel- eller dubbelpil.



* <http://www.equalis.se/sv/vaar-verksamhet/projekt/glukos-nationella-kvalitetsmaal>

Ta INTE behandlingsbeslut grundat på Dexcom G5 Mobile om...

1. ... du startat om sensorn efter 7 dagar (ej godkänd användning).
2. ... pilen saknas.
3. ... du inte har tre prickar i trendkurvan under de senaste 15 minuterna.
4. ... dina symtom inte stämmer överens med värdet.
5. ... du upplever att värdet eller trenden inte stämmer med vad du förväntat dig.
6. ... du har tagit paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil.
7. ... du inte kalibrerat enligt manualen, det vill säga minst var tolfte timme.

Använd då i stället din vanliga glukosmätare!

Två situationer när du har extra god nytta av informationen från de 3 sista prickarna innan du tar ett beslut

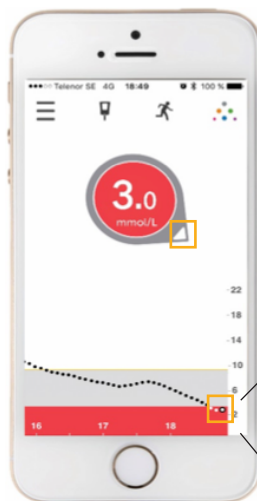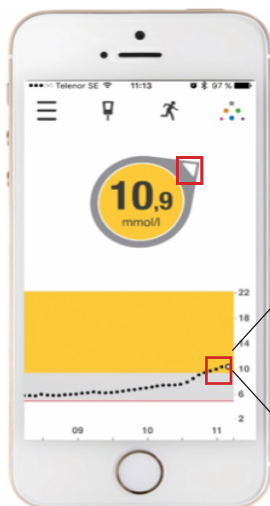

- Pilarna bygger på glukosinformation ca 15 minuter bakåt.
- Prickarna uppdateras var 5:e minut och ger dig snabbare information om "vändning" av glukosvärdet, t.ex. när det går från snabbt sjunkande till stabil glukosnivå.
- Tips! "Vändningen" ser du ännu tydligare i 1-timmesskärmen.

Ref. Dexcom G5 Användarmanual 2015

