


CRONO Super-PID™ 10/20 mL

- **CRONO Super PID** är en bärbar infusionspump för subkutan administration av läkemedel.
- **CRONO Super PID** förenar avancerad teknik och innovativ design. Det lilla formatet och den låga vikten gör att den är perfekt för användning i hemmet.
- **CRONO Super PID** använder speciella sprutor på 10 mL och 20 mL.

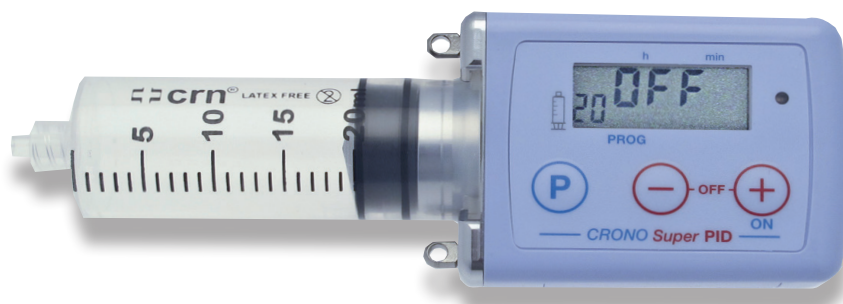

NU MED
5 ÅRS
GARANTI!

Bärbar infusionspump - Teknisk specifikation

Pumpens dimensioner.	76 mm x 49 mm x 29 mm
Vikt	115 gram, inklusive batteri
Batteri	Lithium CR 123 A 3V (räcker till ca 100 infusioner)
Spruta	Engångsspruta, 10 mL eller 20 mL volym, med ett universellt "luer-lock" säkerhetsfäste, dvs. ett bajonettfäste. Engångssprutor ingår inte, utan beställs separat.
Volymmer som kan tillföras	10 mL spruta = Valbar volym från 1 mL till 10 mL, i steg om 1 mL 20 mL spruta = Valbar volym från 1 mL till 20 mL, i steg om 1 mL
Ställbar infusionstid	Kan programmeras från: • 15 minuter upp till 99 timmar med 10 mL spruta • 30 minuter upp till 99 timmar med 20 mL spruta
Pumptryck	3 bar (< 14 psi)
Flödes hastighetens precision	+/- 2 %
Ocklusionstryck	6,0 bar +/- 2
Dosvolym	22 µL/motorrotation (dos = mängd läkemedel som administreras för varje motorrotation)
Inställningsminne	Alla inställningar lagras automatiskt på ett flashminne och finns kvar även om batteriet tas bort från enheten
Display	Stor och tydlig LCD-skärm, 11mm x 28mm
Motor	Sladdlös likströmsmotor, vars rotation kontrolleras av ett infrarött system
Inställningslås	Två inställbara nivåer, låst och olåst
Elektronikkrets med dubbla mikrokontroller	Säkerställer ett säkert och tillförlitligt infusionsystem
Skyddskretsar	Kontrollerar att enheten fungerar korrekt genom att avge ljudsignaler och visa meddelanden på displayen om någon avvikelse skulle uppstå
Kapslingsklass för pumpen	IP 42
Medföljande utrustning	Bärbar infusionspump, infusionsväska, elastiskt bälte, tygfodral, 2 batterier, verktyg att öppna batteriluckan samt bruksanvisning
Garanti	NordicInfu Care AB ger 5 års garanti
Service/Underhåll	Pumpen kräver ingen service

Pumpens driftförhållanden	+10 °C/+45 °C	30 %/75 % relativ fuktighet	700 hPa/1.060 hPa
Pumpens förvaringsförhållanden	-10 °C/+60 °C	10 %/85 % relativ fuktighet	500 hPa/1.060 hPa

FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Pumpen levereras med följande standarinställningar:

Sprutstorlek	20 mL
Ljudsignal vid slut på infusion	AL. on
Låsinställning för knappsats <i>L0 (upplåst) = programmeringsbar</i>	L 0
Tillförseltid	1 h
Antal infusioner	0